


INSTRUCCIONES DE USO DEL DISPOSITIVO DE PUNCIÓN

El dispositivo de punción le permite recoger sangre capilar de las yemas de los dedos (y Lugar Alternativo de Punción LAP) fácilmente y prácticamente sin dolor.



El dispositivo de punción le ofrece 6 niveles de profundidad de penetración en la piel:

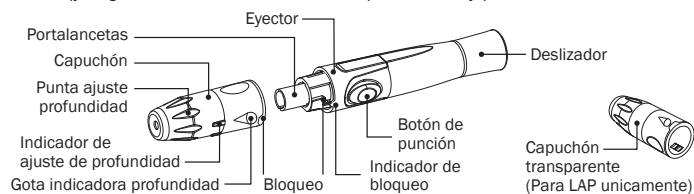


A mayor longitud de la línea del indicador, mayor será la profundidad de penetración de la lanceta

Advertencia


Para reducir la posibilidad de infección:

- ▶ Nunca comparta la lanceta o el dispositivo de punción.
- ▶ Use siempre una lanceta nueva y estéril. Las Lancetas son para uso único.
- ▶ Evite loción de manos, aceites, suciedad o residuos al usar el dispositivo de punción y las lancetas.
- ▶ El uso de lancetas puede ser un peligro biológico potencial. Por favor deséchelas cuidadosamente siguiendo las regulaciones locales.


Uso del Dispositivo de Punción

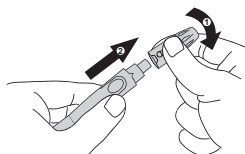


1. Gire y tire del capuchón del dispositivo de punción.

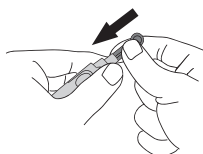

2. Inserte la lanceta en el porta lancetas y presione firmemente hasta que esté asegurada.

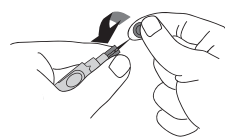

3. Gire el disco protector de la lanceta para quitarlo.

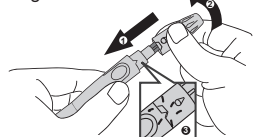

4. Coloque y gire de nuevo el capuchón del dispositivo de punción como muestra la figura hasta que oiga un clic. Cuando esté adecuadamente bloqueado, el indicador de bloqueo estará a la derecha.



5. Sujetando el capuchón seleccione la profundidad de penetración girando la punta ajustable en cualquier dirección hasta que la flecha señale el punto deseado de profundidad.



6. Tire del deslizador hasta que oiga clic. Verá que el interior del botón de liberación cambia de color cuando esté listo.
▶ Si no oye clic, el dispositivo de punción se puede haber bloqueado cuando ha insertado la lanceta.

NOTA

Antes de recoger la gota de sangre:


- ▶ Lave y seque sus manos antes de empezar.
- ▶ Seleccione el lugar de punción en el dedo.
- ▶ Frote el lugar de punción durante 20 segundos antes de la punción.
- ▶ Limpie el lugar de punción usando algodón humedecido con alcohol al 70% y deje secar.




7. Presione firmemente el dispositivo de punción en el lado inferior de su dedo. Presione el botón de liberación para pinchar su dedo, entonces un clic nos indica que la punción esta completada.



8. Retire el dispositivo del lugar de punción. Después retire la primera gota de sangre con un algodón limpio. Presione el lugar de punción para obtener otra gota de sangre. Tenga cuidado de NO aplastar la muestra de sangre. Aplique la gota a la tira.

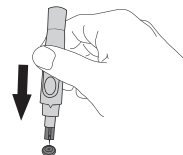


9. Retire la lanceta girando el capuchón protector. Deseche la lanceta usada colocando el disco protector sobre una superficie dura y presionando la punta en el disco.

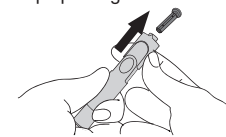

10. Deslice el eyector hacia delante para extraer la lanceta usada. Desechar la lanceta siguiendo las regulaciones locales.

▶ Para la colección de muestras de sangre de lugares alternativos de punción (LAP), use el capuchón transparente.

Lugares Alternativos de Punción (LAP)

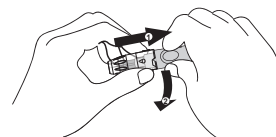

NOTA

Esta Opción no esta disponible para todos los dispositivos. En el manual de usuario de su medidor verá si puede realizar LAP con su dispositivo.

Por favor lea la sección de Lugares Alternativos de Prueba (LAP) en el manual del usuario antes de realizar una prueba LAP.

Sustituya el capuchón del dispositivo de punción por el capuchón transparente para Lugares Alternativos de Punción. Tire del deslizador hasta que oiga clic.

Cuando pinche en la mano, antebrazo o brazo, evite zonas con venas evidentes para prevenir el exceso de sangrado.

Limpieza

La lanceta es desechable y está destinada para un solo uso. El dispositivo de punción es reutilizable.

Para limpiar el dispositivo de punción use jabón suave y agua. No sumerja el dispositivo de punción bajo el agua. Desinfecte el capuchón del dispositivo sumergiéndolo en alcohol al 70% durante 10 minutos y después deje que se seque al aire. NO lo coloque en el lavavajillas o use detergentes.

Información de Símbolos

Símbolo	Referente
	No reutilizar (Sólo para uso de lancetas)
	Consulte las instrucciones para su uso
	Usar antes de / Fecha de Caducidad (Sólo para uso de lancetas)
	Fabricante
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Esterilizado por radiación (Sólo para uso de lancetas)
	Precaución, consulte los documentos adjuntos. (Sólo para uso de lancetas)
	Código del lote

0123 Marcado de la Comunidad Europea

Distribuido por:
DPP INTERNACIONAL, SA
Edificio Multitrade
Calle del Pla, 19
08750 Molins de Rei (Barcelona) - España
TEL/FAX: 34.93.2324211/ 34.93.2326353
www.uright-medical.es

TaiDoc Technology Corporation
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd.,
Wugu Dist., 24888 New Taipei City, Taiwan
 MedNet GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

0123